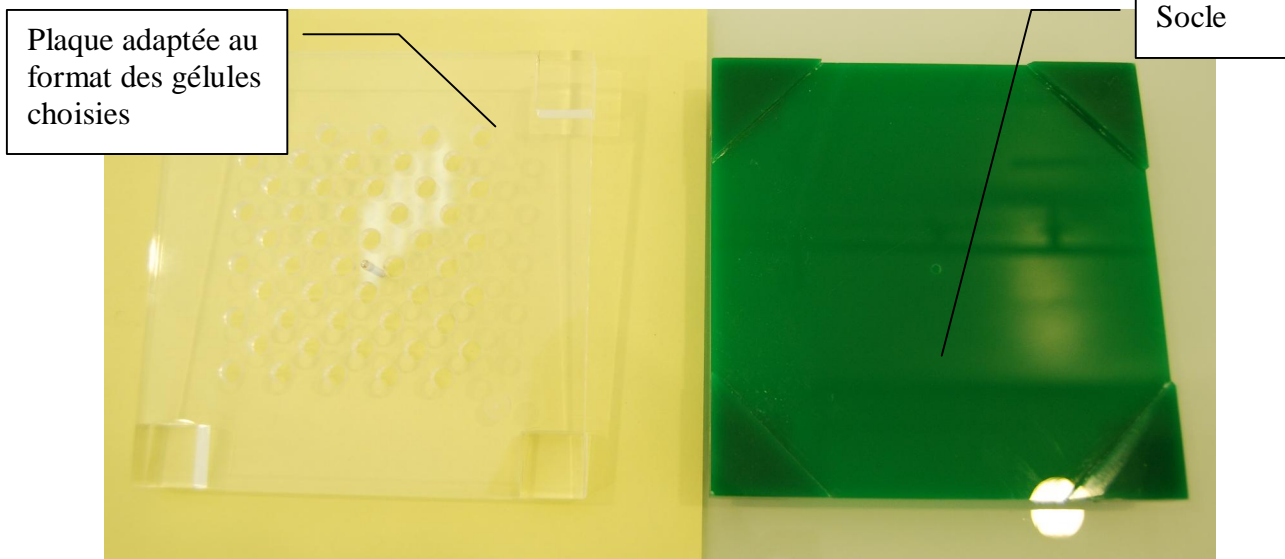



Procédure d'utilisation du gélulier.**1- Présentation.****2- Préparation du gélulier.**

- A partir des calculs effectués, choisir une plaque de gélulier correspondant au numéro des gélules choisies.
- Nettoyer le socle et la plaque à l'aide d'un essuie-tout propre et sec.
- Placer un papier jaune sous le socle.
- Associer le socle et la plaque en position haute. (*Voir photo N°1*).

3- Remplissage des gélules :

- **Mettre des gants**, dans une capsule de pesée, préparer 50 gélules, et effectuer le contrôle des masses des gélules selon **AQ Pr ECF 03**.
- Si le contrôle des masses des gélules choisies (**AQ Pr ECF 03**) est satisfaisant, **en portant des gants**, ouvrir toutes les gélules et installer les parties les plus longues et les plus étroites des gélules (parties inférieures) dans les alvéoles du gélulier (*Voir photo N°2*).
- Avec une carte en plastique déposer un peu de mélange de poudres sur le gélulier, et l'étaler de manière à remplir les gélules (*Voir photo N°3*).
- Tapoter (tassement par vibrations douces) délicatement le gélulier afin de tasser un peu les poudres et de les faire pénétrer dans les gélules.
- Avec la carte en plastique, déposer un peu de mélange, étaler, tapoter.
- Recommencer afin que toutes les gélules soient remplies de manière uniforme et qu'il ne reste plus de poudre (**même sur le papier jaune**).
- Faire pivoter la plaque du gélulier de moins de 45° sur son socle (la plaque descend, l'extrémité des gélules apparaît). (*Voir photo N°4*).
- **En portant des gants**, monter la partie supérieure de chaque gélule (boucher les gélules), appuyer pour garantir la fermeture des gélules. (*Voir photo N°5*).
- Sortir chaque gélule et l'essuyer avec un essuie-tout et la déposer dans une capsule de pesée propre.

Photo N°1 : Préparation gélulier

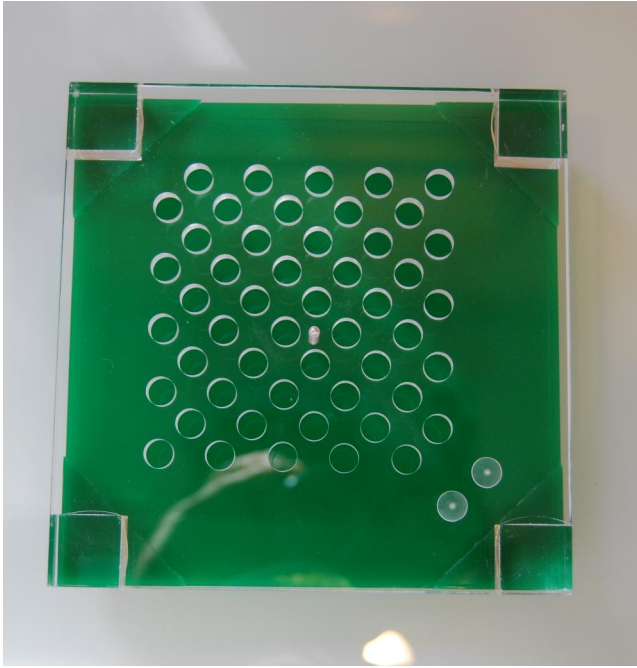

Phot N°2 : Installation gélules



Parties
supérieures

Alvéole contenant
une partie inférieure

Photo N°3 : Remplissage gélules



Photo N°4 : Extraction gélules

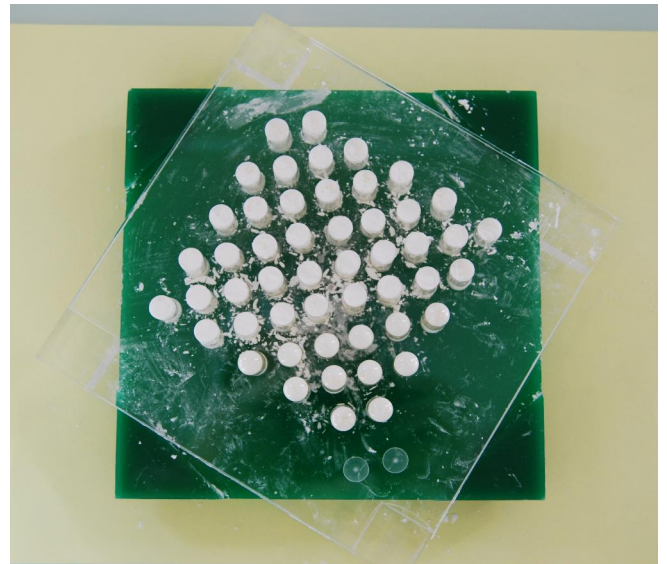


Photo N°5 : Montage partie supérieure



Capsule contenant les parties supérieures des gélules.

Gélules complètes essuyées.

4- Nettoyage du matériel :

- Nettoyer à sec le socle et la plaque. **ATTENTION AUCUN MATERIEL NE DOIT ETRE NETTOYER A L'EAU (utiliser un chiffon propre).**
- Ranger le socle et la plaque.